

samsun vina




SERAFIN

Clear Aligner System

Khay chỉnh nha Serafin và phụ kiện

Cắt theo đường viền nướu

Cắt dưới đường viền nướu 1.5 mm

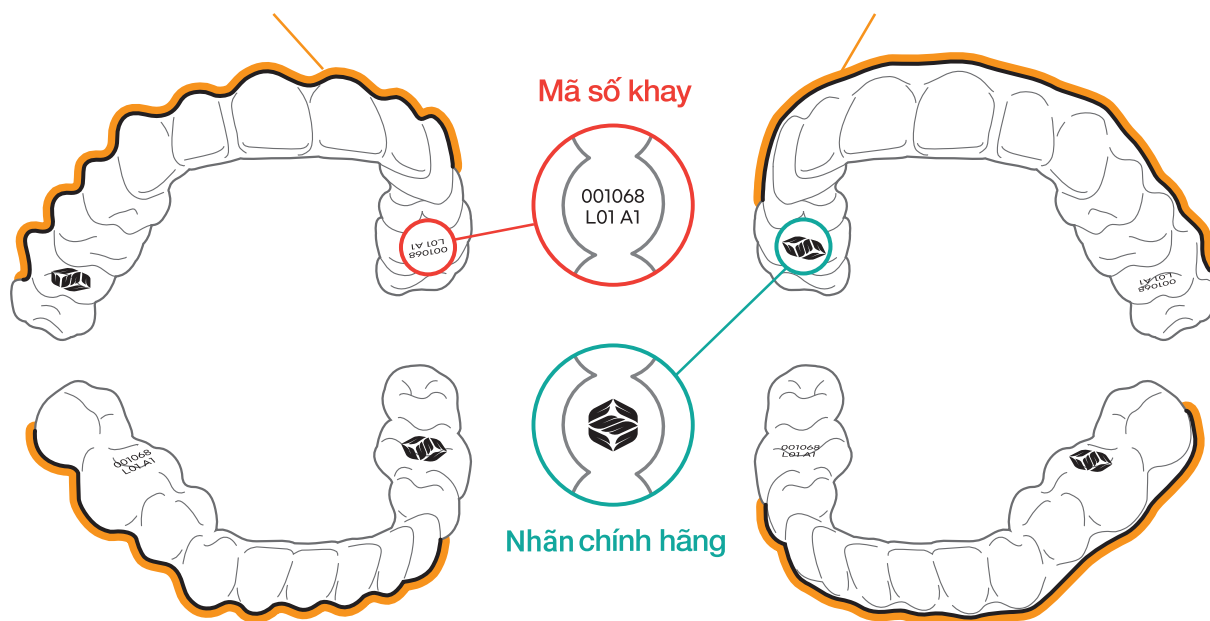

Phụ kiện cơ bản

Sản phẩm bán riêng



Hộp đựng khay

Túi xách


Khay chỉnh nha

Remover

Chewie


Foaming
(kem đánh răng)

Đặc điểm của Serafin

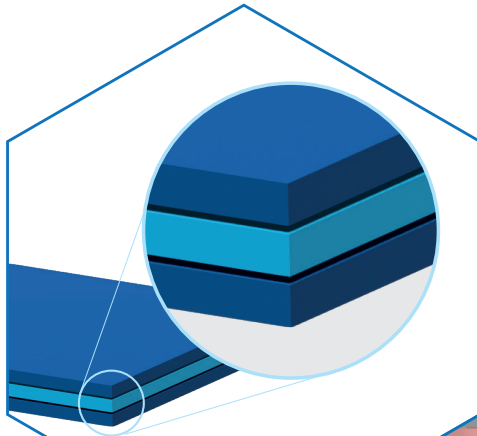

Sheet 3 lớp

Vật liệu (Polyurethane Composite) đã đánh giá về tính tương thích sinh học, tạo ra lực nhẹ và liên tục.

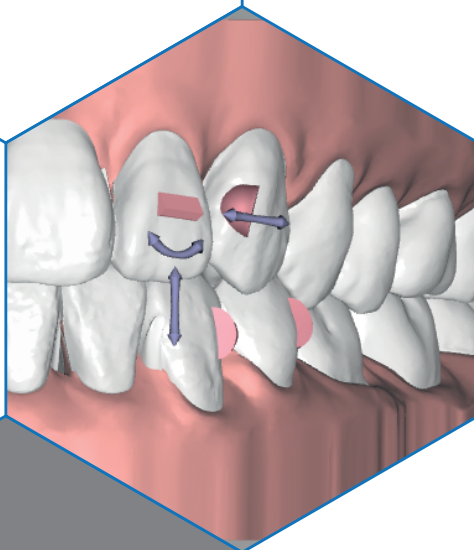

Attachment


Tùy theo từng kế hoạch điều trị cần thiết sẽ áp dụng thuật toán thiết kế hình dáng và vị trí dán của Attachment.



SERAview, SERAview Web

Dễ dàng kiểm tra và sửa kế hoạch điều trị nhanh chóng và tỉ mỉ mọi lúc với điện thoại, máy tính, máy tính bảng. Thuận tiện cho việc tư vấn bệnh nhân.

*Một số tính năng giới hạn ở SERAview Web.

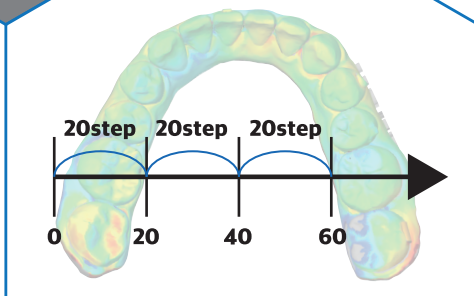

EVERY20

Mỗi 20 bước sẽ được kiểm tra lại quá trình điều trị thông qua việc chồng dữ liệu. Khi có thể nên thay đổi kế hoạch điều trị Serafin tránh kéo dài thời gian điều trị.

*Regular, Regular AP, i, iAP

Serafin Workflow



*Ảnh trong/ngoài hàm
*Ảnh X-quang
*Scan trong miệng/mẫu hàm
Thu thập dữ liệu bệnh nhân

*SeraQuick
Tư vấn bệnh nhân

*Doctor Site
Viết và nộp chỉ định

Bắt đầu đặt hàng

- *Ảnh ngoài mặt: chính diện, nụ cười chính diện, góc nghiêng 90°
- *Ảnh trong miệng: chính diện, cạnh trái/phải, mặt cắn hàm trên/dưới
- *Ảnh X-quang: panorama, cephalo
- *Scan trong miệng/mẫu hàm: hàm trên, hàm dưới, khớp cắn (ở option AP cần có file khớp cắn cấu hình (Configuration occlusal))
- *SeraQuick: chương trình sử dụng dữ liệu trình chiếu chỉnh nha 3D (cần có Coin/hạn 3 ngày)
- *Trang dành cho Bác sĩ: www.serafinvip.com



Kế hoạch điều trị được
cập nhật từ Trung tâm
Thiết Kế Serafin

SERAVIEW, SERAVIEW Web
Tính năng kiểm tra và
chỉnh sửa kế hoạch điều trị

Sản xuất khay và
gửi hàng

Thời gian thiết kế
khoảng **3 ngày làm việc**
tính từ ngày nộp
chỉ định

Approve

Tùy thuộc vào
dịch vụ giao hàng quốc tế

*SERAVIEW: kiểm tra kế hoạch điều trị 3D

*SERAVIEW Web: SERAVIEW dạng Web bị giới hạn tính năng ở máy tính bảng, điện thoại

Các gói Khay chỉnh nha Serafin

Phân loại Bệnh nhân	Gói	Tình trạng áp dụng	Quá trình Điều trị								Hạn đặt hàng
			Khay chỉnh 1 st	Khay bổ sung 2 nd		Khay bổ sung 3 rd		Khay bổ sung 4 th			
Người lớn > 18 tuổi	R-Passive 4	Khay duy trì	4 cặp (giống nhau)	-	-	-	-	-	-	4 tháng	
	R-Passive 8	Khay duy trì	8 cặp (giống nhau)	-	-	-	-	-	-	8 tháng	
	R-Active	Sau tinh chỉnh bị tái phát cần điều trị nhẹ	4 cặp	new	max 4	-	-	-	-	4 tháng	
	10	Răng trước nghiêng và chen chúc nhẹ	10 cặp	new	max 10	Có phí new	max 10	-	-	1 năm	
	20	Răng trước nghiêng và chen chúc vừa	20 cặp	new	max 20		max 10	-	-	2 năm	
	20 PLUS	Niềng toàn bộ (không nhổ răng)	20 cặp	new	max 20	new	max 20	new	max 20	3 năm	

* Các gói trên bị giới hạn về số lần đặt hàng – xin hãy lưu ý.

Người lớn & Vị thành niên	Regular	Niềng toàn bộ (Nhổ răng)	20 cặp	new or keep	Không giới hạn (20 cặp cơ bản➡)	5 năm
	Regular AP*	CO-MI Discrepancy	20 cặp		Không giới hạn (20 cặp cơ bản➡)	5 năm
Trẻ em	i	Chỉnh răng cối và nong cung	20 cặp		Không giới hạn (20 cặp cơ bản➡)	1 năm
	iAP*	Cải thiện quan hệ AP bằng Twin Block	20 cặp		Không giới hạn (20 cặp cơ bản➡)	18 tháng

***Regular và Regular AP:** Thu thập dữ liệu quét ở tương quan khớp cắn cấu trúc (hàm dưới có thể đưa trước, lùi sau hoặc lệch bên và cho phép tăng khoảng cách liên hàm so với khớp cắn trung tâm để đặt block AP)

***Chỉ định i / iAP:**

Hai hàm: Áp dụng khi $\geq 3/4$ nửa hàm còn ≥ 2 răng sữa

Một hàm: Áp dụng khi cả 2 nửa hàm còn ≥ 2 răng sữa

Keep: Quá trình điều trị theo đúng kế hoạch có thể lấy tiếp khay theo kế hoạch cũ mà **không cần nộp dữ liệu mới**

New: Nộp dữ liệu mới và yêu cầu thiết kế mới nếu muốn thay đổi kế hoạch điều trị



Kiểm tra trước /sau khi điều trị chỉnh nha một cách

Quick ngay trong ngày!

Kiểm tra “Dự đoán Chỉnh nha 3D” Chỉ **5** phút sau khi tải dữ liệu quét (STL) lên


Chỉnh sửa 3D

Trực tiếp chỉnh sửa
vị trí và sắp xếp răng

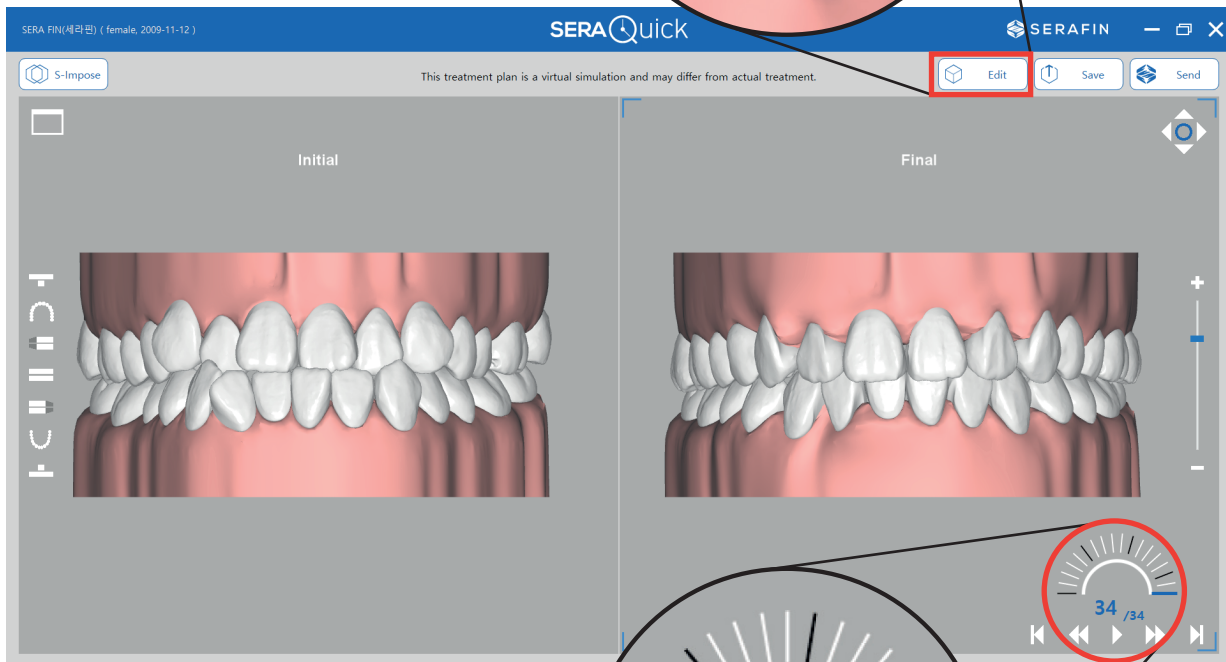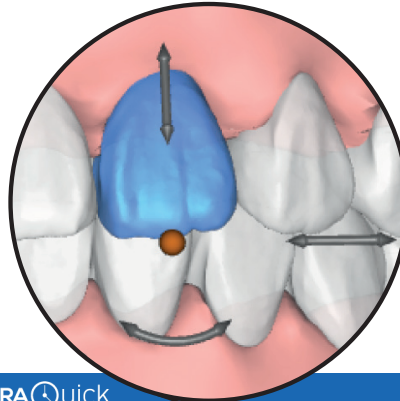

Số Bước

Dự đoán số bước
theo kế hoạch điều trị

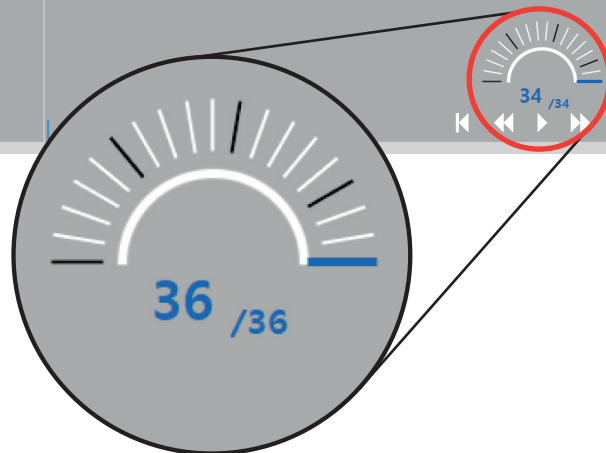

- ▶ Khi chạy một SeraQuick mới, sẽ trừ 1 coin.
- ▶ Dữ liệu bệnh nhân sẽ tự động xóa sau 3 ngày.

Các ca lâm sàng

Ca lâm sàng 1



SERAFIN 10

Thông tin bệnh nhân

Nữ/ 25 tuổi

Vấn đề chính

Chen chúc, Class I

Điều trị

Thời gian điều trị: 12 tháng

Số lượng khay: hàm trên 20 khay, hàm dưới 20 khay

Trước điều trị



Tiến triển



Sau điều trị



Ca lâm sàng 2



SERAFIN 20

Thông tin bệnh nhân

Nữ/ 23 tuổi

Vấn đề chính

Thưa kẽ, đường cười cần cải thiện, Class III, cắn chìa, cắn hở, cắn chéo răng trước

Điều trị

Thời gian điều trị: 18 tháng

Số lượng khay: hàm trên 40+10 khay, hàm dưới 40+10 khay

Trước điều trị



Tiến triển



Sau điều trị



Ca lâm sàng 3



SERAFIN 20 Plus

Thông tin bệnh nhân

Nam/ 13 tuổi

Vấn đề chính

Cung răng hẹp, răng chìa, Class II div 1, chen chúc

Điều trị

Thời gian điều trị: 13 tháng

Số lượng khay: hàm trên 49 khay, hàm dưới 63 khay

Trước điều trị



Tiến triển



Sau điều trị



Ca lâm sàng 4



SERAFIN Regular

Thông tin bệnh nhân

Nữ/ 16 tuổi

Vấn đề chính

Chen chúc, Class I, cắn hở, cắn chéo răng sau, răng chìa, thưa kẽ

Điều trị

Thời gian điều trị: 27 tháng

Số lượng khay: hàm trên 94 khay, hàm dưới 94 khay

Trước điều trị



Tiến triển



Sau điều trị



Các ca lâm sàng

Ca lâm sàng 5



SERAFIN Regular

Thông tin bệnh nhân

Nữ/ 18 tuổi

Vấn đề chính

Cung răng hẹp, Class III, bất đối xứng, chen chúc

Điều trị

Thời gian điều trị: 30 tháng

Số lượng khay: hàm trên 73 khay, hàm dưới 84 khay

Trước điều trị



Tiến triển



Sau điều trị



Ca lâm sàng 6



SERAFIN Regular AP

Thông tin bệnh nhân

Nữ/ 47 tuổi

Vấn đề chính

Chen chúc, cung răng hẹp, cắn chéo răng trước

Điều trị

Thời gian điều trị: 16 tháng

Số lượng khay: hàm trên 135 khay, hàm dưới 135 khay

Trước điều trị



Tiến triển



Sau điều trị



Ca lâm sàng 7



SERAFIN i

Thông tin bệnh nhân

Nam/ 11 tuổi

Vấn đề chính

Chen chúc, cung răng hẹp

Điều trị

Thời gian điều trị: 12 tháng

Số lượng khay: hàm trên 39 khay, hàm dưới 32 khay

Trước điều trị



Tiến triển



Sau điều trị



Ca lâm sàng 8



SERAFIN i

Thông tin bệnh nhân

Nam/ 11 tuổi

Vấn đề chính

Cung răng hẹp, cắn sâu, Class II div 1, chen chúc

Điều trị

Thời gian điều trị: 17 tháng

Số lượng khay: hàm trên 54 khay, hàm dưới 54 khay

Trước điều trị



Tiến triển



Sau điều trị



samsun vina



Website



Fanpage



Group Serafin

- ① TP.HCM: 112 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP.HCM
- ② Trung tâm Đào tạo Hà Nội:
187 Đường đôi Nam An Khánh, KĐT Nam An Khánh, Xã An Khánh, TP.Hà Nội
- ③ Trung tâm Đào tạo TP.HCM:
43 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP.HCM
- ④ Văn phòng Đà Nẵng: Tòa nhà Tiktak, 21/4 Lê Hồng Phong, Phường Hải Châu, Đà Nẵng

Chi tiết xin liên hệ:

1800 6079

www.samsunvina.com