

samsun vina




SERAFIN

Clear Aligner System

Khay chỉnh nha Serafin và phụ kiện

Cắt theo đường viền nướu

Cắt dưới đường viền nướu 1.5mm

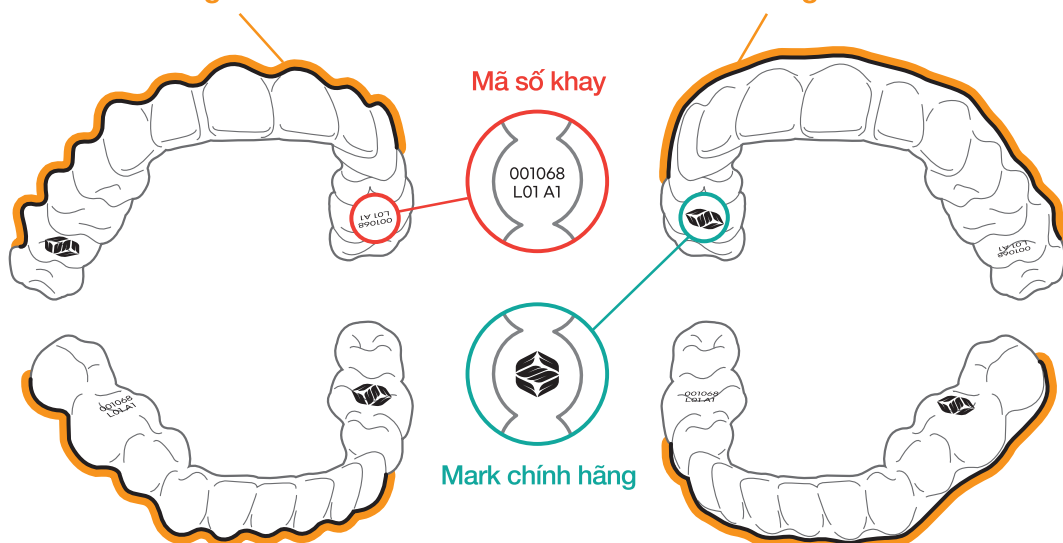

Phụ kiện cơ bản

Sản phẩm bán riêng



Hộp đựng khay

Eco bag


Khay chỉnh
nha trong suốt

Remover

Chewie


Foaming
(kem đánh răng)

Đặc điểm của Serafin

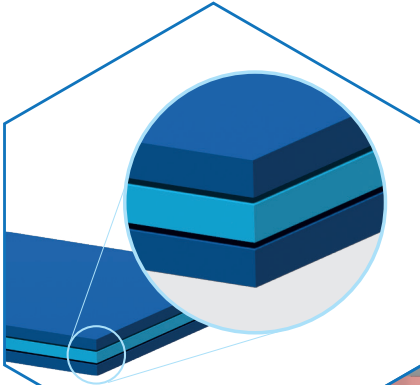

Sheet 3 lớp

Vật liệu (Polyurethane Composite) đã được đánh giá về tính tương thích sinh học, tạo ra lực nhẹ và liên tục.

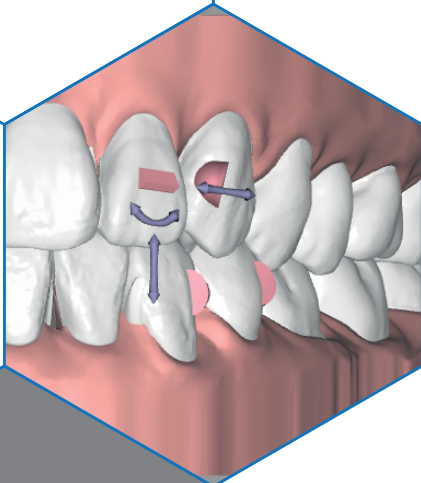

Attachment

Tùy theo từng kế hoạch điều trị cần thiết sẽ áp dụng thuật toán thiết kế hình dáng và vị trí dán của Attachment.




SeraView, SeraViewWeb

Dễ dàng kiểm tra và sửa kế hoạch điều trị nhanh chóng và tỉ mỉ mọi lúc với Pc, laptop, template, phone.

Thuận tiện cho việc tư vấn bệnh nhân.

*một số tính năng giới hạn ở SeraViewWeb.

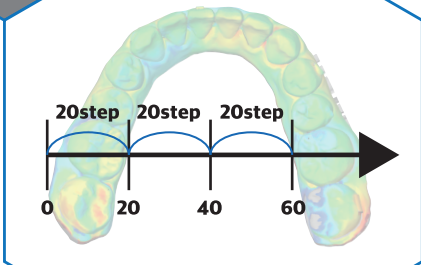


EVERY20

Mỗi 20 staging sẽ được kiểm tra lại quá trình điều trị thông qua dữ liệu chống chéo (supper data) Khi cần nên thay đổi kế hoạch điều trị Serafin Tránh sự kéo dài thời gian điều trị

*Regular, RegularAP, i, iAP

Serafin Workflow

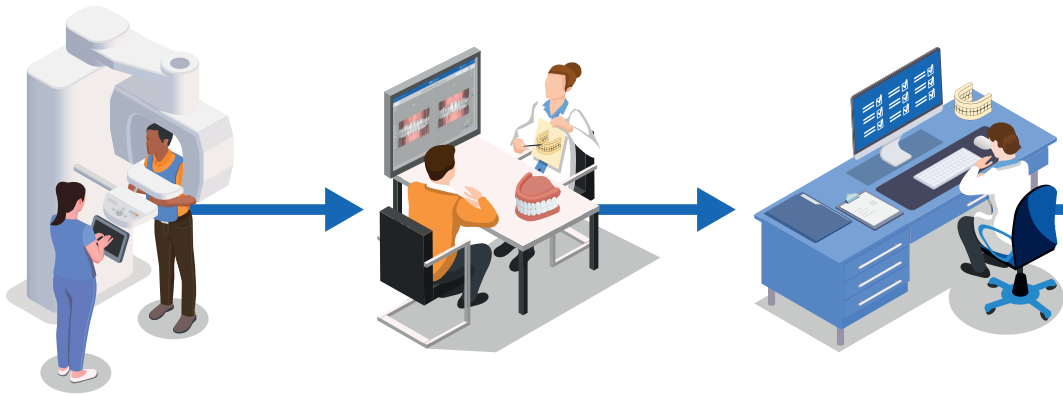

*Ảnh trong/ ngoài hàm
*Ảnh X-quang
*Scanfile / mẫu hàm

Thu thập dữ liệu bệnh nhân

*SeraQuick
Tư vấn bệnh nhân

*Doctor Site
Viết và nộp bảng chỉ định

Bắt đầu đặt hàng

*Ảnh ngoài hàm : chính diện, chính diện cười, cạnh bên 90°

*Ảnh trong hàm : Chính diện, Cạnh Trái/Phải, Mặt cắn Hàm trên, dưới

*Ảnh X-quang : panorama, cephalo

*ScanFile (Mẫu Sáp) : Hàm trên, Hàm dưới, Bite (Ở Option AP cần có file khớp cắn cấu hình (Configuration occlusal)

*SeraQuick : Program sử dụng scanfile trình chiếu chỉnh nha 3D (Cần có Coin / hạn 3 ngày)

*Doctor Site : www.serafinvip.com



Kế hoạch điều trị được cập nhật từ Trung tâm Thiết Kế Serafin

SeraView, SeraViewWeb
Tính năng kiểm tra và chỉnh sửa kế hoạch điều trị

Sản xuất Khay và Gửi hàng

Thời gian thiết kế khoảng **3 ngày làm việc** tính từ ngày nộp bản chỉ định

Approve

Tùy thuộc vào **dịch vụ giao hàng quốc tế.**

***SeraView** : Kiểm tra và chỉnh sửa kế hoạch 3D, Program trình chiếu điều trị 3D
***SeraView Web** : SeraView dạng Web bị giới hạn tính năng ở Template, điện thoại

Các gói Khay chỉnh nha Serafin và process

Phân loại Bệnh nhân	Gói	Tình trạng áp dụng	Quá trình Điều trị								Hạn đặt hàng
			Khay Chính 1 st	Khay bổ sung 2 nd		Khay bổ sung 3 rd		Khay bổ sung 4 th			
Người lớn · Vị thành niên	R-Passive 4	Retainer	4 cặp (giống nhau)	-	-	-	-	-	-	4 tháng	
	R-Passive 8	Retainer	8 cặp (giống nhau)	-	-	-	-	-	-	8 tháng	
	R-Active	Sau tình chỉnh bị tái phát cần điều trị nhẹ	4 cặp	new	max 4	-	-	-	-	4 tháng	
	10	Răng trước nghiêng và chen chúc nhẹ	10 cặp	new	max 10	Có phí new	max 10	-	-	1 năm	
	20	Răng trước nghiêng và chen chúc vừa	20 cặp	new	max 20		max 10	-	-	2 năm	
	20 PLUS	Niềng toàn bộ (không nhổ răng)	20 cặp	new	max 20	new	max 20	new	max 20	3 năm	

* các gói trên bị giới hạn về số lần đặt hàng – xin hãy lưu ý.

Người lớn · Vị thành niên	Regular	Niềng toàn bộ (Nhổ Răng)	20 cặp cơ bản	new or keep	Không giới hạn (20 cặp cơ bản▶)	5 năm
	Regular AP*	CO-MI Discrepancy	20 cặp cơ bản		không giới hạn (20 cặp cơ bản▶)	5 năm
Trẻ em	i	Chỉnh răng cối và nong cung	20 cặp cơ bản		không giới hạn (20 cặp cơ bản▶)	1 năm
	iAP*	Cải thiện quan hệ AP qua hiệu quả Twin Block	20 cặp cơ bản		không giới hạn (20 cặp cơ bản▶)	18 tháng

* Regular AP và iAP : Cần nộp scanfile khớp cắn cấu hình

* i, iAP phạm vi có thể đặt hàng : Hai Hàm : Trường hợp trong 4 nửa hàm ở 3 nửa hàm có 2 răng sửa trở lên

Một Hàm : Trường hợp trong 2 nửa hàm ở 2 nửa hàm đó còn 2 răng sửa trở lên.

keep : Quá trình điều trị theo đúng kế hoạch, có thể yêu cầu gửi tiếp 20 cặp khay tiếp theo **không cần scanfile mới**.

new : Yêu cầu thiết kế kế hoạch mới trong trường hợp: Quá trình điều trị không đúng kế hoạch hoặc không còn khay tiếp theo (**cần có scanfile mới**)



Kiểm tra trước / sau khi điều trị chỉnh nha một cách

Quick ngay trong ngày!

Kiểm tra “Dự đoán Chỉnh nha 3D” Chỉ **5** phút sau khi tải ScanFile(STL) lên


Chỉnh sửa 3D

Trực tiếp chỉnh sửa vị trí và sắp xếp răng

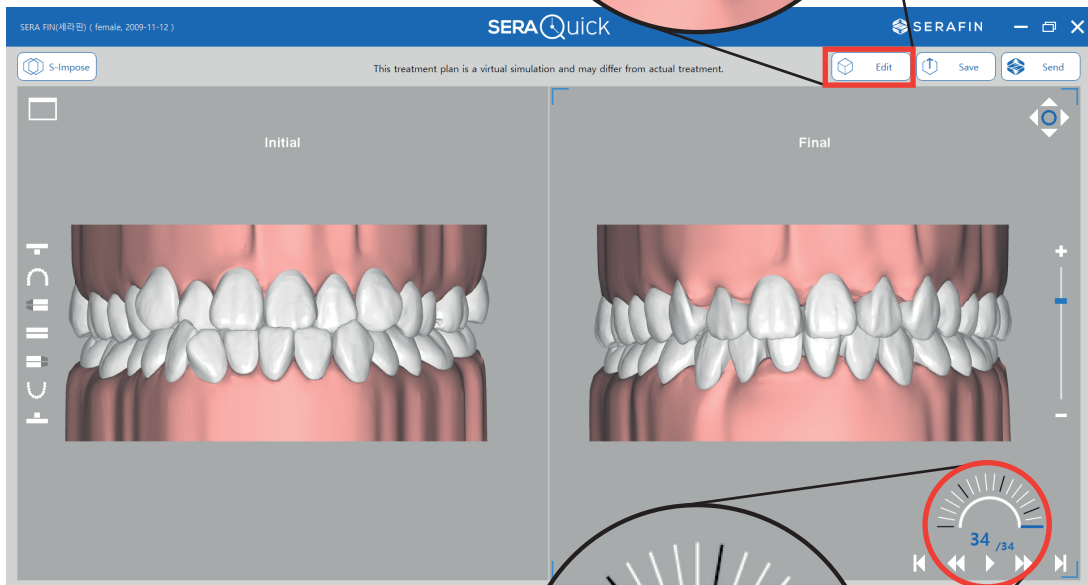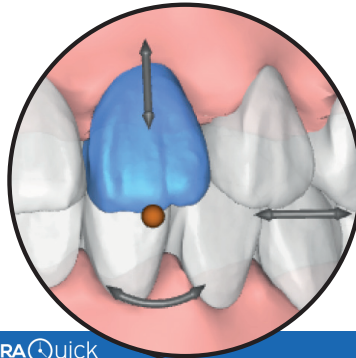

Số Staggering

Dự đoán số Staggering theo kế hoạch điều trị

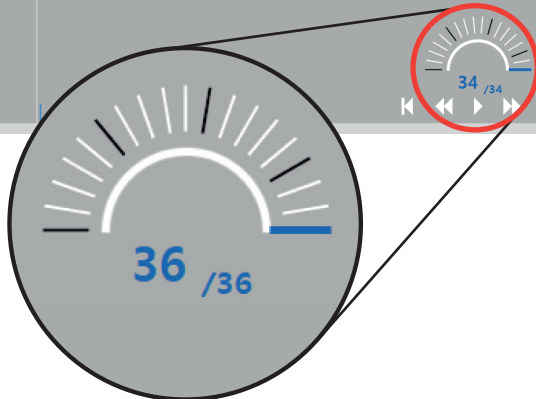

- Khi chạy một SeraQuick mới, sẽ trừ 1 coin.
- Dữ liệu bệnh nhân sẽ tự động xóa sau 3 ngày.

samsun vina



Website



Fanpage



Group Serafin

- ① TP. HCM : 112 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP.HCM
- ② Hà Nội : 187 Đường Đồi Nam An Khánh, KĐT Nam An Khánh, Xã An Khánh, TP. Hà Nội
- ③ Đà Nẵng : 137 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- ④ Samsun Vina Education Center : 43 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP. HCM

Chi tiết xin liên hệ:

1800 6079

www.samsunvina.com