

MEDIT *i600*







**Nha khoa kỹ thuật số
trong tầm tay bạn**

Quét Siêu mượt mà

Nhẹ,

Trọng lượng siêu nhẹ chỉ 245g với độ bám được cải thiện để tạo sự thoải mái.

Mượt mà,

Cải thiện tốc độ và cung cấp hình ảnh quét tối ưu trải nghiệm quét mượt mà hơn.

Màu sắc,

Truyền dữ liệu quét sống động thông qua hệ thống quang học mới được sử dụng trong Medit i700.

Bộ não của i700 với sự đột phá về màu sắc

Siêu chính xác,

Siêu nhẹ,

Siêu mượt mà - tương đồng với i700.

Quy trình làm việc kỹ thuật số bắt đầu từ dữ liệu chính xác. Medit i600 thu thập chính xác dữ liệu để dàng cho nha khoa kỹ thuật số.

* Độ chính xác cao

Độ chính xác toàn hàm: $10.9 \mu\text{m} \pm 0.98$

* Thu thập dữ liệu quét chính xác từ vùng răng cửa đến bề mặt khớp cắn.

Đơn giản nhất Dễ sử dụng nhất.

Kiểm soát hoàn toàn quá trình quét của bạn chỉ bằng một nút bấm.
Không cần nhiều cáp và hub.
Chỉ cần cắm & quét với một dây cáp kết nối trực tiếp với PC.



Đầu Tip đảo ngược 180°




Nút bắt đầu quét



Cáp có thể tháo rời

Dễ dàng làm tất cả

Medit i600 có thể **được kết nối trực tiếp với máy tính** chỉ bằng **một dây cáp**, loại bỏ các hạn chế của thiết bị có dây giữa ghế và phòng khám để có phạm vi điều trị rộng hơn bằng cách sử dụng máy quét trong miệng.

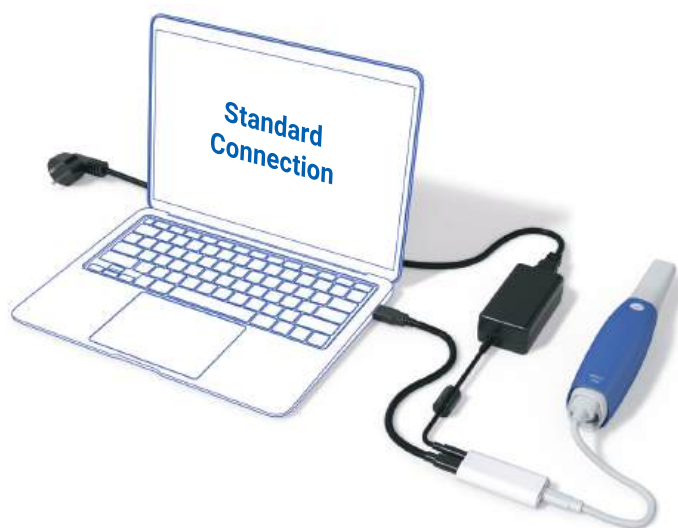


Vùng quét lớn hơn (So với i500)

Vùng quét lớn hơn (15X13mm) ghi lại nhiều dữ liệu hơn trong một lần quét để có trải nghiệm thuận tiện hơn.

i600 i500

Giúp quét dễ dàng hơn

Trải nghiệm thu thập dữ liệu số hóa tuyệt vời với **Medit Scan for Clinics**. Công nghệ phần mềm tiên tiến của chúng tôi giúp việc quét thuận tiện hơn cho bạn.

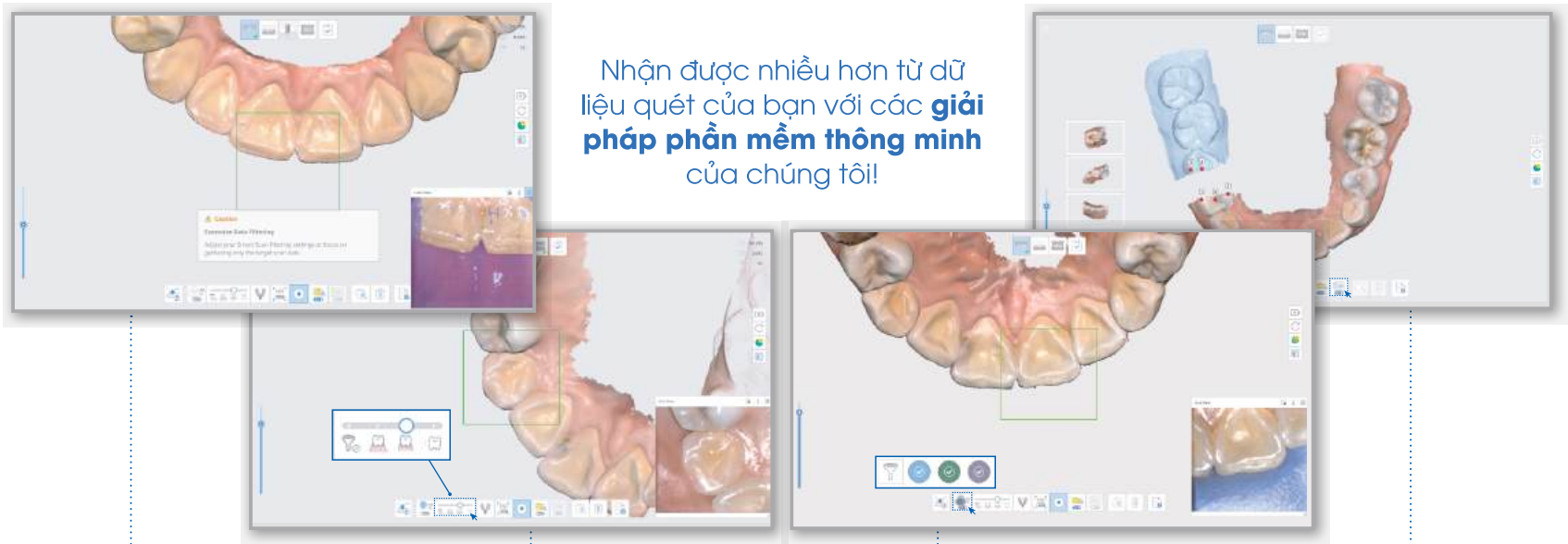

Nhận được nhiều hơn từ dữ liệu quét của bạn với các **giải pháp phần mềm thông minh** của chúng tôi!



Smart Scan Guide

Hướng dẫn người dùng được tăng cường cung cấp để trợ giúp cho các bất thường được phát hiện trong quá trình quét.



Smart Scan Filtering

Nâng cao hiệu suất lọc AI giảm bớt quá trình quét bằng cách lọc ra các mô mềm như môi, má và lưỡi.



Smart Color Filtering

Tự động lọc các màu đã đăng ký, chẳng hạn như màu sắc của găng tay y tế, trong quá trình quét.



Smart Stitching

Quét bằng chiến lược quét của riêng bạn. Dữ liệu quét phân mảnh được căn chỉnh với tự động phát hiện khu vực chung.

Tăng sự hài lòng cho bệnh nhân

Với dữ liệu chính xác giúp cải thiện sự hài lòng về thủ tục điều trị.
Tư vấn bằng hình ảnh 3D và các ứng dụng khác nhau của Medit
cũng nâng cao sự hài lòng cho trải nghiệm tổng thể nha khoa.

Hoàn thành nhiều việc hơn trên ghế

Không bao giờ phải lo lắng về phí phát sinh khi sử dụng các hệ
thống và chương trình phức tạp! Sự đa dạng của Medit Apps
làm cho điều trị dễ dàng hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn.



Khả năng tiếp cận — Đáng kinh ngạc

Cho dù bạn là người mới làm quen với nha khoa kỹ thuật số hay đang tìm kiếm thêm một máy quét, i600 sẽ là một đối tác hoàn hảo.



MEDIT i600

Thông số kỹ thuật

Danh mục		Medit i600
Công nghệ quét	Khung quét	Lên đến 35 FPS
	Công nghệ hình ảnh	Công nghệ video 3D trong chuyển động Chụp trực tuyến đầy đủ màu sắc 3D
	Nguồn LED	LED
	Công nghệ chống mờ	Chống mờ thích ứng
Độ chính xác	Toàn hàm	10.9µm ± 0.98
Tay cầm	Kích thước	248 x 44 x 47.4 mm
	Tổng trọng lượng	245 g
Đầu quét	Kích thước đầu quét	22.2 x 15.9 mm
	Vùng quét	15 x 13 mm
	Có thể hấp diệt trùng	Lên đến 100 lần Hấp 121°C: 30 phút Hấp 134°C: 4 phút (loại hút chân không) Hấp 135°C: 10 phút (loại diệt trùng trọng lực)
	Đầu quét có thể đảo ngược	Có
Chế độ đặc biệt	Chế độ điều khiển từ xa	Không
	Khử trùng UV-C	Không
Cáp		USB 3.1 Gen1

- Hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của PC
- Kiểm tra độ chính xác của máy quét i600 bằng Medit R&D
- Đầu quét cho 150 chu kỳ hấp diệt trùng được bán riêng

Vui lòng quét mã QR để biết [các yêu cầu hệ thống cập nhật](#). >>



Về chúng tôi

Medit chuyên về đo lường 3D và các giải pháp CAD/CAM cho các phòng khám và Labo nha khoa, bao gồm máy quét trong miệng, dựa trên công nghệ hiện đại được cấp bằng sáng chế của riêng mình. Chúng tôi cũng phát triển các giải pháp nền tảng cho nhận dạng kỹ thuật số, hỗ trợ quy trình làm việc hợp tác. Ngoài ra, đồng Solutionix cung cấp máy quét 3D và phần mềm cho thị trường công nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp công nghệ tiên tiến và các sản phẩm chất lượng cao nhất để đảm bảo sự phát triển lẫn nhau cho tất cả các đối tác.

Cộng đồng Medit của chúng tôi

Phản hồi liên tục, đề xuất quy trình điều trị mới và thảo luận tích cực.

Từ những cuộc tranh luận sôi nổi đến những cuộc trò chuyện vui nhộn, cộng đồng Medit luôn sôi nổi với những khách hàng đam mê của chúng tôi.

Các đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới tích cực hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời chân thành chào đón các đồng nghiệp mới vào nha khoa kỹ thuật số.

Quét mã QR để tham gia!

Medit và cộng đồng đồng nghiệp của Medit ủng hộ và chúc bạn gặp nhiều may mắn trên hành trình mới trong lĩnh vực nha khoa kỹ thuật số.



Nhóm người dùng



Nhóm người dùng
tại Việt Nam



Học viện Medit



Trung tâm trợ giúp
tại Việt Nam

samsun vina



Website



Fanpage



Medit VN

- ① TP. HCM : 112 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1
- ② Hà Nội : Tầng 14, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân
- ③ Đà Nẵng: 137 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Quận Hải Châu
- ④ Samsun Vina Education Center : 43 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7

Chi tiết xin liên hệ:

1800 6079

www.samsunvina.com